

# Lock Balloon Catheter

Honesty<sup>®</sup><sub>MP</sub>

TMP Lock Balloon Catheter



株式会社  
東海メディカルプロダクツ

# 長年のバルーンテクノロジーを結集した 大血管閉塞用バルーンカテーテル




## 本製品の特徴

- 1 **ポリウレタン素材を用いたコンプライアントバルーン & 血流遮断に適したコシのあるカテーテルシャフト**
  - 四半世紀にわたる IABP バルーンカテーテルで培った技術を採用
- 2 **バルーンの迅速なイン/デフレーションタイムを実現**
  - 広いバルーン拡張用ルーメンにより、迅速なバルーンの拡張・収縮が可能
- 3 **ガイドワイヤーの使用が可能なコアキシャル構造**
  - 0.035Inch ガイドワイヤー対応のガイドワイヤールーメンを採用
- 4 **X線不透過素材を先端チップ及びマーカーに使用**
  - 透視下でのバルーン位置確認が可能
- 5 **柔軟性の高いソフト先端チップを採用**
  - 血管への低侵襲性を確保、ガイドワイヤーへの追従性を向上

Lock Balloon ...  
Catheter

製品仕様	OCB-03A	OCB-03B	OCB-03C
バルーン全長	5cm		
標準拡張径	φ32mm (23mL)		
カテーテルシャフト外径	9Fr		
カテーテル有効長	75cm	35cm	100cm

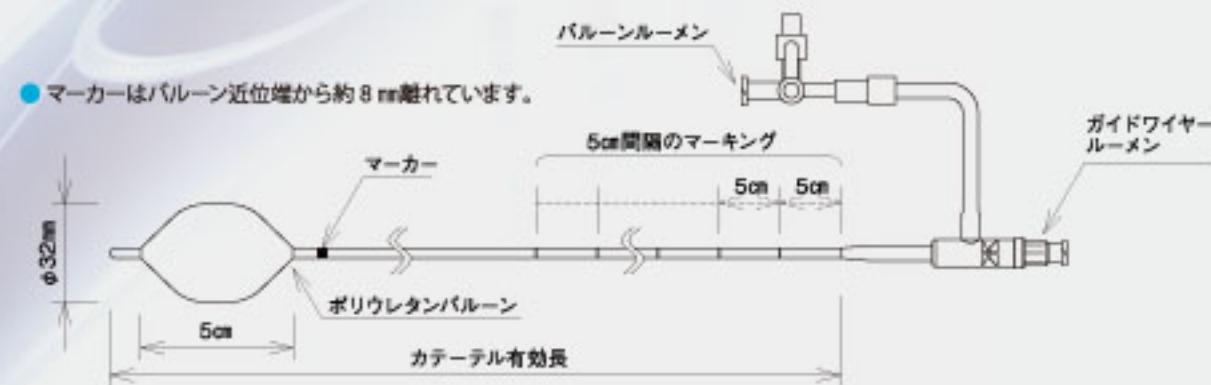

## バルーン拡張状態目安

[バルーンラッピング径: 12Fr、適応ガイドワイヤー径: 0.035inch]

23mL	35mL	40mL	45mL

Honesty RP ...  
TMP Lock Balloon Catheter

製品仕様	OCB-09A
バルーン全長	3cm
標準拡張径	φ20mm (5mL)
カテーテルシャフト外径	7Fr
カテーテル有効長	100cm



## バルーン拡張状態目安

[バルーンラッピング径: 12Fr、適応ガイドワイヤー径: 0.035inch]

5mL	10mL	15mL	20mL

仕 様						
型番	JAN	カテーテル有効長	カテーテルシャフト径	バルーン全長	標準拡張径	最小適合シースサイズ
OCB-03A	4580137870838	75cm	9Fr	5cm	φ32mm (23mL)	12Fr
OCB-03B	4580137870845	30cm				
OCB-03C	4580137873181	100cm	7Fr	3cm	φ20mm (5mL)	9Fr
OCB-09A	4580137877547					

■ 適応ガイドワイヤー径：0.035inch

■ 最小適合シースサイズをご利用の場合、シースからバルーンカテーテルを抜去する事は出来ません。

拡張径目安									
型番	液体注入量								
	5mL	10mL	15mL	20mL	23mL	30mL	35mL	40mL	45mL
OCB-03A	/				φ32mm	φ34mm	φ37mm	φ40mm	φ42mm
OCB-03B									
OCB-03C									
OCB-09A	φ20mm	φ27mm	φ32mm	φ35mm	/				

標準拡張径（ノミナル）

■ 上記は目安であり、保証値ではありません。临床上では透視下で十分にバルーンの拡張状態を確認の上、ご使用ください。

■ このカタログに記載の仕様、デザインは予告無く変更する場合があります。

■ 本製品をご使用になる際には、添付文書を必ずお読み下さい。

医療機器製造販売承認番号：21000BZZ00722000

高度管理医療機器 単回使用

販 売 名：TMP ロックバルーンカテーテル

保険請求分類：血管内手術用カテーテル / オクリュージョンカテーテル ②特殊型

JMDN 分類：中心循環系閉塞術用血管内カテーテル

〈製造販売元・販売元〉



[本社] 〒466-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485

TEL.0568-81-7954 (代) FAX.0568-81-7785

URL / <http://www.tokaimedpro.co.jp>

E-mail : [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

[お客様問合せ窓口]

TEL.0568-54-7661 FAX.0568-87-0058